

ARTROMOT®-SP3

do stawu skokowego

Nowy wymiar terapii stawu skokowego!

ARTROMOT®-SP3 zapewnia ruch zgodny z fizjologią stawu według wzorców PNF.

ARTROMOT®-SP3 steruje się pilotem graficznym z dużym wyświetlaczem, a obsługa menu przy użyciu ikon jest łatwa i intuicyjna. Dzięki temu programowanie jest teraz jeszcze łatwiejsze.

ARTROMOT®-SP3 to maksymalna ergonomia, łatwa regulacja umożliwiająca ćwiczenia w pozycji siedzącej i leżącej z pełnym dostosowaniem do wymiarów kończyny pacjenta, a także prosta dezynfekcja.

Dane techniczne:

Wersje:

ARTROMOT®-SP3 Standard
ARTROMOT®-SP3 Standard chip
ARTROMOT®-SP3 Comfort
ARTROMOT®-SP3 Comfort chip

Zakresy ruchu:

Zgięcie podszwowe / grzbietowe 50° / 0° / 40°
Inwersja / ewersja (odwrócenie/nawrócenie) 40° / 0° / 20°

Funkcje wersji ARTROMOT®-SP3 standard:

Czas ćwiczenia 1 - 59 min / 1 - 24 h / praca ciągła
Pauzy 0 - 59 s
Prędkość 5% - 100%
Autorewers przy oporze (silnik A i B oddzielnie) 1 - 25 poz.
Sterowanie silnikami A i B włączony / wyłączony - umożliwia ruchy izolowane
Tryb synchroniczny / asynchroniczny Synchroniczny: ruch prowadzony wg wzorców PNF
Asynchroniczny: losowo generowane kombinacje ruchowe w określonych zakresach ruchu
Łączny czas terapii zapis całkowitego czasu terapii pacjenta
Nowy pacjent zresetowanie ustawień pilota przed nowym pacjentem
Pozycja transportowa przygotowanie do zapakowania i transportu
Blokada klawiatury zapobiega przypadkowej zmianie parametrów terapii
Menu dla serwisu

Funkcje dodane do wersji ARTROMOT®-SP3 Comfort:

Program stretchingu delikatne rozszerzanie zakresu ruchu oddzielnie:
zginania podszwowe, zginania grzbietowe, inwersji, ewersji
Dokumentacja terapii zapis wyników ćwiczeń w formie wykresów oddzielnie
dla zginania podszwowe/grzbietowe i dla inwersji/ewersji
Program rozgrzewki stopniowe rozszerzanie do maksymalnego zakresu ruchu
Program izolacji separowane, naprzemienne ruchy zginania lub in-/ewersji

Funkcje dodane do ARTROMOT®-SP3 z kartami chip:

Karta Chip pacjenta zachowanie indywidualnych danych terapii pacjenta

Wymiary:

Masa: 11 kg
Wymiary zewnętrzne: 78 x 42 x 39,5 cm

Numery katalogowe:

ARTROMOT®-SP3 Standard 80.00.035
ARTROMOT®-SP3 Standard chip 80.00.036
ARTROMOT®-SP3 Comfort 80.00.037
ARTROMOT®-SP3 Comfort chip 80.00.038
Karta chip 0.0034.048

ARTROMOT®-SP3

do stawu skokowego



ARTROMOT®-SP3 Comfort

Wskazania:

ARTROMOT-SP3 jest przeznaczony do leczenia większości urazów i schorzeń stawów skokowych oraz do pooperacyjnej i pozabiegowej rehabilitacji.

Przykłady:

- artrotomie, artroskopie połączone z synovektomią, artrolizą lub innymi zabiegami wewnątrzstawowymi
- zaopatrzone operacyjnie złamania i pseudoartrozy
- wszelkie operacje odtworzeniowe (z możliwością ćwiczeń)
- ingerencje tkanek miękkich w obrębie stawu skokowego
- operacje rekonstrukcji ścięgien i więzadeł
- operacje chrząstki stawowej
- rekonstrukcje ścięgna achillesa




Pilot sterujący




Zgięcie podeszwowe



Zgięcie grzbietowe

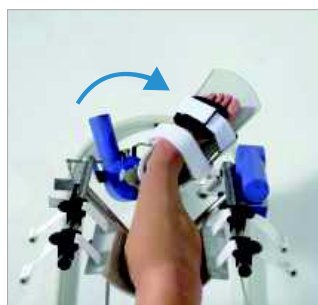

Inwersja

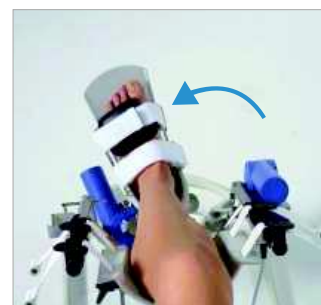

Ewersja